

■ Anti-Dekubitus-Matratzen

Statische Anti-Dekubitus-Matratzen

- HOSPISOFT
- MEMOBA-MATRATZEN
- EVOBA
- DUOMED




Dynamische Wechseldrucksysteme

- APM 460 sensor
- ASX digital


Weiterbildungsangebot

- Dekubitus-Prophylaxe
- Kompressions-Therapie

KAT001D 08/16

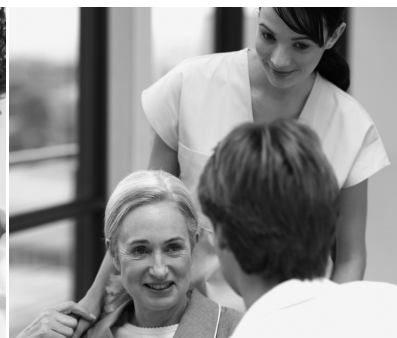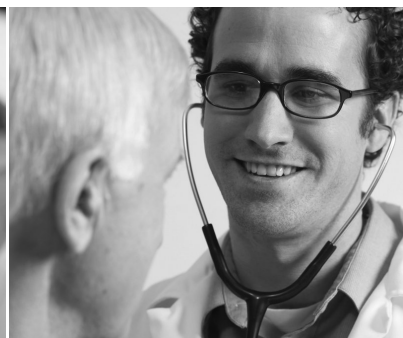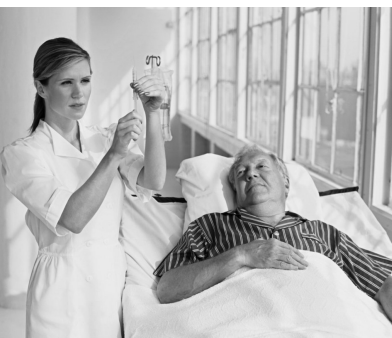

Beste Dekubitusprophylaxe – klinisch getestet

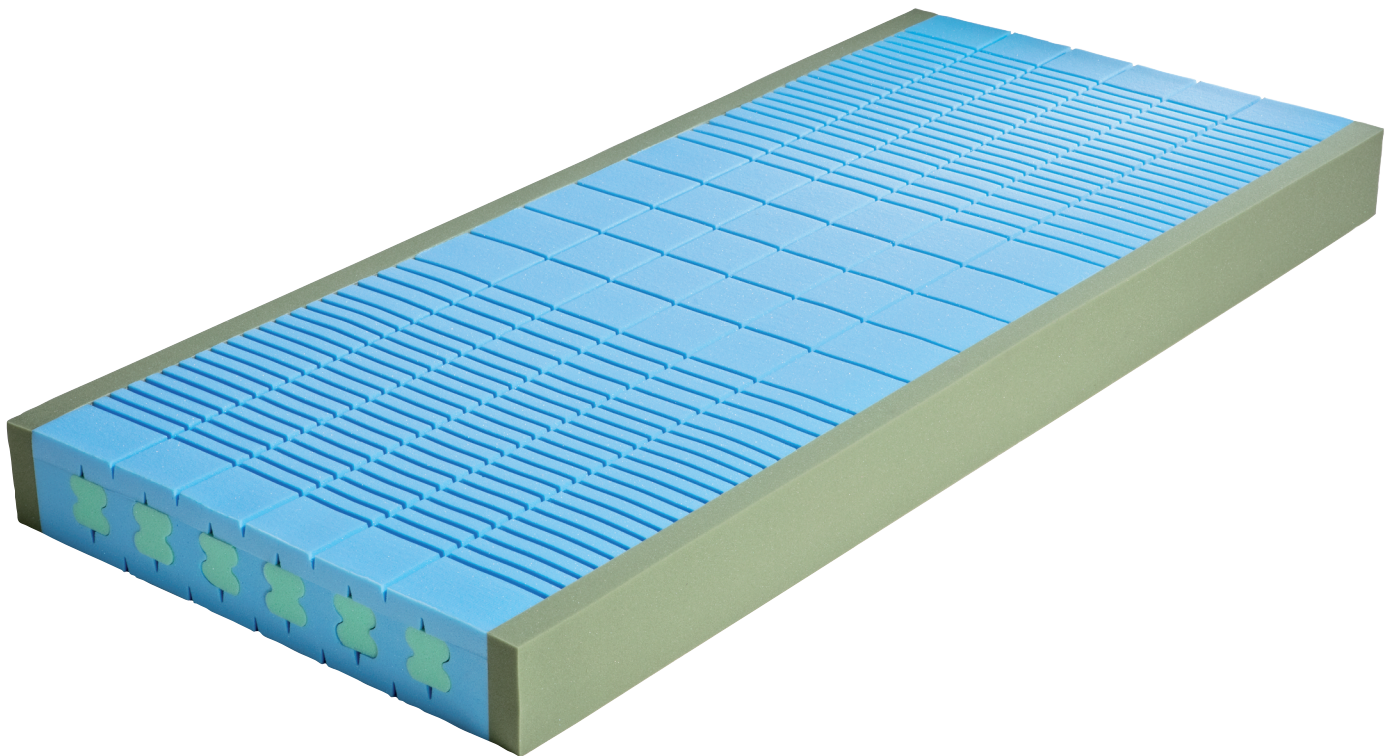

Höchster Liegekomfort



- Keine Druckstellen
- Weniger schwitzen dank trockenem Bettklima
- Sicherheit durch Randzonenverstärkung
- Kein Körpergefühlsverlust
- Gute Stützkraft

Gute Investition

- Neu entwickelte Matratze für zufriedene Patienten und Heimbewohner
- Sehr langlebig und strapazierfähig
- Höchste Schweizer Qualität
- Gute Garantieleistungen durch OBA AG

Einfache Anwendung

- Einfache Reinigung von Obatex DA Schutzbezug
- Keine Gefahr von Verwechslung – HOSPISOFT ist beidseitig nutzbar
- Für Dekubitusprophylaxe und als normale Matratze einsetzbar
- Geeignet für Heimbewohner bis 150 kg

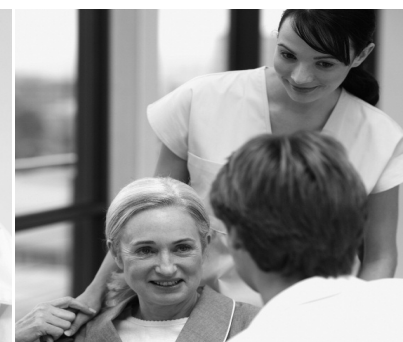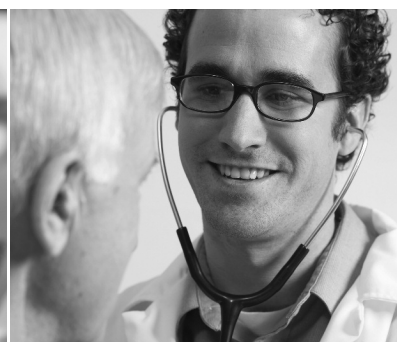

Hygiene

Der Inkontinenz-Schutzbezug Obatex DA schützt die Matratze vor Feuchtigkeit und ist einfach zu reinigen. Der Bezug ist wasserdampfdurchlässig und resistent gegen organische Flüssigkeiten.



Weniger schwitzen

Die vertikalen und horizontalen Belüftungskanäle garantieren eine optimale Durchlüftung des Matratzenkerns. So entsteht ein angenehm trockenes Bettklima.

Sicherheit


Die beiden Längskanten bieten grosse Stabilität und dienen gleichzeitig als Aufstehhilfe. Die Mittelzonenverstärkung erhöht zudem den Liegekomfort.

Druckentlastung

Der neu entwickelte Schaumstoffkern garantiert eine effiziente Dekubitusprophylaxe. Die Längs- und Querprofilierung sorgt für optimale Körperanpassung.


Härtegrad	weich – mittel
Dekubitusgrad	3
Patientengewicht	bis 150 kg
Grösse	Standard: 90 x 200 cm, alle Grössen erhältlich
Höhe	15 cm
Matratzengewicht	13 kg
Raumgewicht	45 / 40 kg/m ³
Kern	EvoPore 7-Zonen-Mischporenschaum
Längskantenverstärkung	50 kg/m ³
Handgriffe	auf Wunsch: 4, 8
Bezug	Obatex DA beige, flammhemmend Brandklasse A, Normen 12952 1-4
Pflege	Bezug waschbar bis 95°, tumblerfest
Garantie	Kern: 10 Jahre (ab 3. Jahr pro rata), Bezug: 2 Jahre
Swiss made	EN ISO 9001/2000

EvoPore HRC behält im Gebrauch seine extrem hohe Stabilität und hervorragende Stützkraft.

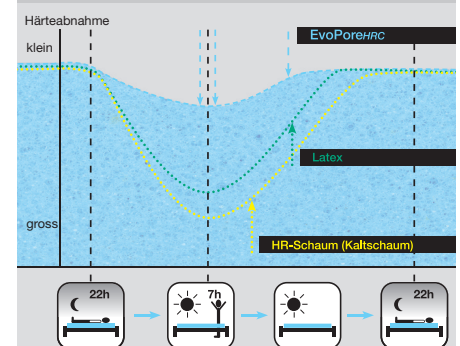

Härteabnahme der Matratze im Gebrauch.

Das Schlafkonzept für optimale Druckentlastung und Liegekomfort im Pflegebereich

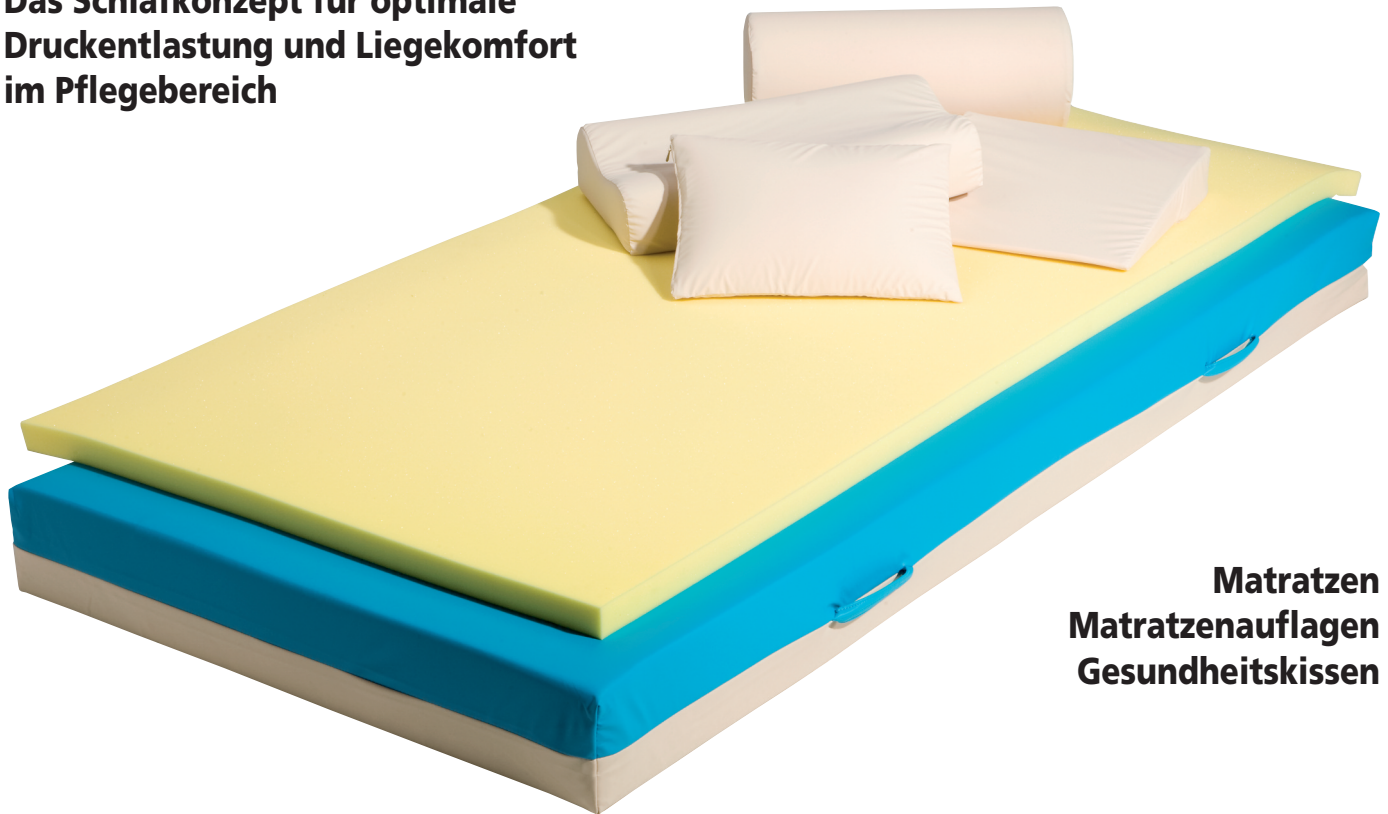

**Matratzen
Matratzenauflagen
Gesundheitskissen**

Höchster Liegekomfort


- Keine Druckstellen
- Der atmungsfähige viscoelastische Schaumstoff sorgt für trockenes Klima
- Kein Körpergefühlsverlust
- Sicherheit durch Randzonenverstärkung

Gute Investition


- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Langlebig und strapazierfähig
- Höchste Schweizer Qualität
- Gute Garantieleistungen durch OBA AG

Sehr vielseitig

- Hygienisch einwandfrei
- Breites Sortiment
- Für Dekubitusprophylaxe und als normale Matratze einsetzbar

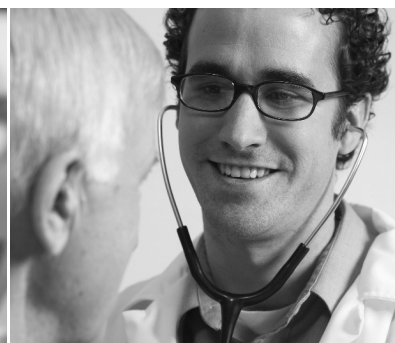

MEMOBA-Matratzen

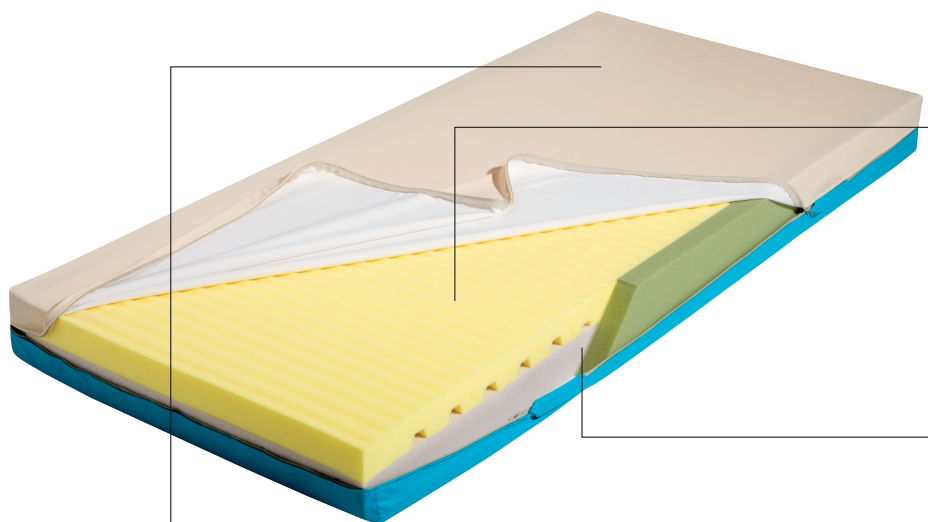

Hygiene

Der Inkontinenz-Schutzbezug Obatex DA schützt die Matratze vor Feuchtigkeit und ist einfach zu reinigen. Der Bezug ist waschbar bei 95°C, tumb-

lerfest, flammhemmend ausgerüstet sowie wasserdampfdurchlässig und resistent gegen organische Flüssigkeiten.

Angenehmes Bettklima


MEMOBA-Schaumstoff ist atmungsaktiv und bietet somit ein angenehmes, trockenes Bettklima. Zusätzlich ermöglicht die Oberflächenprofilierung eine hervorragende Luft- und Feuchtigkeitszirkulation.

Sicherheit

Die beiden Längskanten-Verstärkungen bieten eine grosse Stabilität. Der MEMOBA-Kern besteht aus einer 8 cm dicken HRC-Schaum-EvoPore, die die Matratze stabilisiert, und einer 7 cm dicken Visco-Schaumschicht mit Luftkanälen sowie einer Schulterkomfortzone.

So funktioniert MEMOBA:


- MEMOBA ist der viscoelastische Spezialschaumstoff, der eine hervorragende Druckentlastung bei geringer wie auch bei starker Gewichtsbelastung bietet.
- Sobald Körperwärme und -gewicht auf MEMOBA einwirken, wird der Druck automatisch gleichmässig verteilt – Druckstellen somit vermieden.
- Klinische Tests zeigen, dass sich MEMOBA-Produkte dank ihrer ausgezeichneten druckentlastenden Eigenschaften bestens für die Dekubitusprophylaxe eignen.

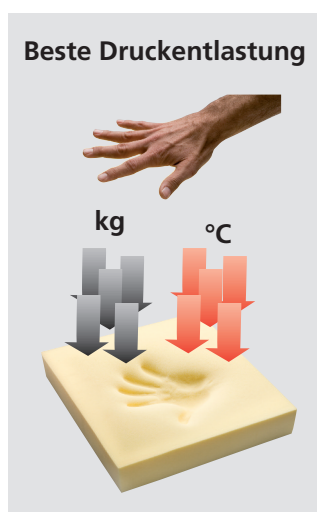

- Dank der offeneren Schaumstoffstruktur ist eine optimale Luftzirkulation und somit eine gute Wärmeverteilung gewährleistet. MEMOBA-Produkte sind atmungsaktiv, verhindern einen Wärmestau und begünstigen den Feuchtigkeitstransport.



MEMOBA-Medium

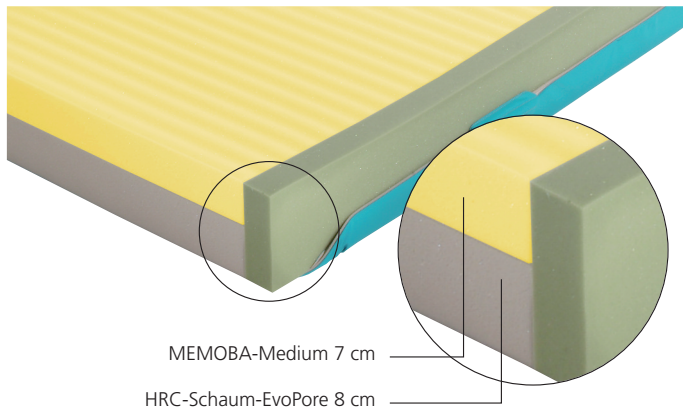

Aufbau

Der 7 cm hohe viscoelastische MEMOBA-Medium-Schaum sorgt für optimalen Liegekomfort. Der untere Teil, der 8 cm HRC-Schaum-EvoPore in Kombination mit der Randzonenverstärkung, bietet die nötige Stabilität und Sicherheit.


Druckentlastung

Der MEMOBA-Medium-Schaumstoff sorgt für eine hervorragende Druckentlastung und bietet eine effiziente Dekubitusprophylaxe. So können auch Rücken-, Nacken- und Gliederschmerzen gelindert werden.

Anwendung

MEMOBA-Medium wird als normale Spital- und Heimmatratze eingesetzt. Dank den hervorragenden Druckentlastungseigenschaften eignet sie sich auch sehr gut als Dekubitusprophylaxe. Zudem kann sie auf beiden Seiten eingesetzt werden.

MEMOBA-Soft

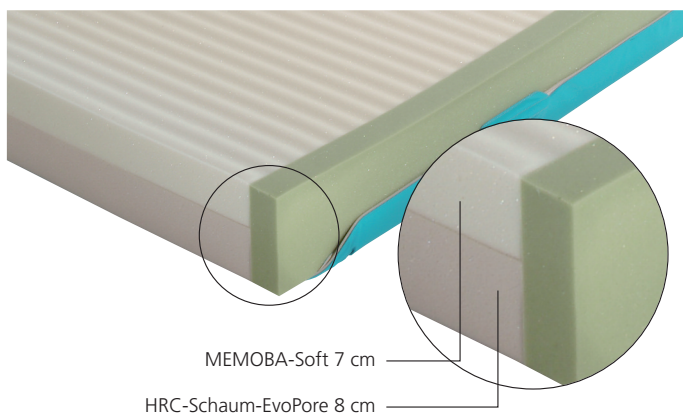

Aufbau

Der 7 cm hohe viscoelastische MEMOBA-Soft-Schaum sorgt für sehr angenehmen Liegekomfort. Der untere Teil, der 8 cm HRC-Schaum-EvoPore in Kombination mit der Randzonenverstärkung, bietet die nötige Stabilität und Sicherheit.


Hochsensibel

Der MEMOBA-Soft-Schaumstoff wurde für sehr leichte Patienten entwickelt. Er ist äusserst flexibel und sorgt somit für eine unvergleichbare Druckentlastung. MEMOBA-Soft eignet sich auch für schmerzempfindliche Patienten und Heimbewohner.

Anwendung

MEMOBA-Soft bietet eine unvergleichbare Elastizität, weshalb Sie sich sehr gut als Dekubitusprophylaxe einsetzen lässt. Diese Matratze wird vor allem für sehr leichte und schmerzempfindliche Bewohner und Patienten verwendet.

MEMOBA-Duo

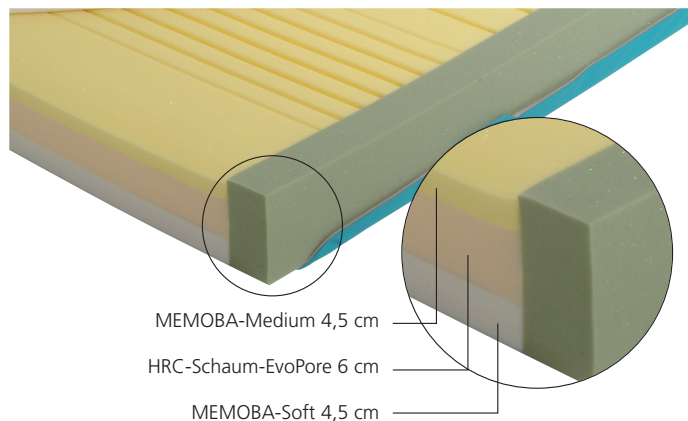

Aufbau

Die obere Schicht, der 4,5 cm hohe viscoelastische MEMOBA-Medium-Schaum, sorgt für einen optimalen mittelharten Liegekomfort.

Der mittlere Teil, der 6 cm HRC-Schaum-EvoPore in Kombination mit der Randzonenverstärkung, bietet Stabilität und Sicherheit.


Die untere Schicht, der 4,5 cm hohe viscoelastische MEMOBA-Soft-Schaum, ist sehr weich und anschmiegsam.

Vielseitiger Einsatz

Der MEMOBA-Medium-Teil wird als normale Spital- und Heimmatratze eingesetzt. Dank den hervorragenden Druckentlastungseigenschaften eignet er sich auch sehr gut als Dekubitusprophylaxe.

Der MEMOBA-Soft-Teil wurde für sehr leichte Patienten entwickelt. Er ist äusserst flexibel und sorgt somit für eine unvergleichbare Druckentlastung. MEMOBA-Soft eignet sich auch für schmerzempfindliche Patienten und Heimbewohner.

Technische Angaben

	MEMOBA-Medium	MEMOBA-Soft	MEMOBA-Duo
Härtegrad	mittel	weich	weich + mittel
Dekubitusgrad	2	2	2
Patientengewicht	bis 110 kg	bis 70 kg	bis 70/110 kg
Grösse	Standard: 90 x 200 cm, alle Grössen erhältlich	Standard: 90 x 200 cm, alle Grössen erhältlich	Standard: 90 x 200 cm, alle Grössen erhältlich
Höhe	15 cm	15 cm	15 cm
Matratzengewicht	13 kg	14 kg	13,5 kg
Raumgewicht	60/35 kg/m ³	53/35 kg/m ³	60/35/53 kg/m ³
Kern	Profiliertes Kombikern SAF-HRC-Schaum-EvoPore	Profiliertes Kombikern SAF-HRC-Schaum-EvoPore	Profiliertes Kombikern SAF-HRC-Schaum-EvoPore
Längskantenverstärkung	50 kg/m ³	50 kg/m ³	50 kg/m ³
Handgriffe	auf Wunsch: 4, 8	auf Wunsch: 4, 8	auf Wunsch: 4, 8
Bezug	Obatex DA beige, flammhemmend	Obatex DA beige, flammhemmend	Obatex DA beige, flammhemmend
Pflege	Bezug waschbar bis 95°, tumlerfest	Bezug waschbar bis 95°, tumlerfest	Bezug waschbar bis 95°, tumlerfest
Garantie	Kern: 10 Jahre (ab 3. Jahr pro rata), Bezug: 2 Jahre	Kern: 10 Jahre (ab 3. Jahr pro rata), Bezug: 2 Jahre	Kern: 10 Jahre (ab 3. Jahr pro rata), Bezug: 2 Jahre
Swiss made 	EN ISO 9001/2000	EN ISO 9001/2000	EN ISO 9001/2000

MEMOBA-Matratzenauflagen

Vielseitig und einfach

MEMOBA-Matratzenauflagen können auf jeder Standard-Matratze eingesetzt werden. Dadurch ist die Handhabung einfach und flexibel.

Hygienisch

Auf Wunsch können MEMOBA-Matratzenauflagen mit einem Obatex Matratzenbezug ausgerüstet werden. Dieser ist mit 95 °C waschbar, tumlerfest, atmungsaktiv, inkontinenzbeständig und flammhemmend.



Dekubitusprophylaxe

Der MEMOBA-Schaumstoff sorgt für hervorragende Druckentlastung und bietet eine effiziente Dekubitusprophylaxe. Dessen Wirkung wurde


bereits mehrfach klinisch erfolgreich getestet. Auch können Rücken-, Nacken- und Gliederschmerzen gelindert werden.

MEMOBA-Auflage Medium



Die mittelharte Matratzenauflage MEMOBA-Medium sorgt für optimalen Liegekomfort und bietet gleichzeitig eine angenehme Druckentlastung.

MEMOBA-Auflage Soft

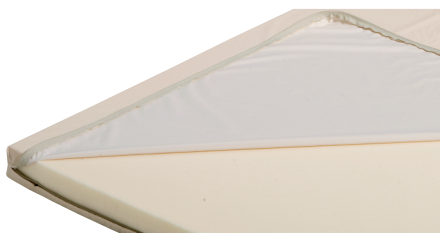


Die Matratzenauflage MEMOBA-Soft ist für sehr leichte Bewohner und Patienten geeignet. Beste Resultate erzielt sie auch bei äusserst schmerzempfindlichen Patienten.

MEMOBA-Auflage Duro



Die Matratzenauflage MEMOBA-Duro wird für Patienten eingesetzt, die gerne auf einer härteren Unterlage liegen und trotzdem eine angenehme Druckentlastung schätzen.

Technische Angaben

	MEMOBA-Medium	MEMOBA-Soft	MEMOBA-Duro
Härtegrad	mittel	weich	hart
Dekubitusgrad	2	2	2
Patientengewicht	bis 80 kg	bis 60 kg	bis 120 kg
Grösse	Standard: 90 x 200 cm, alle Grössen erhältlich	Standard: 90 x 200 cm, alle Grössen erhältlich	Standard: 90 x 200 cm, alle Grössen erhältlich
Höhe	4 oder 7 cm	7 cm	4 cm
Bezug	Obatex beige, flammhemmend	Obatex beige, flammhemmend	Obatex beige, flammhemmend
Pflege	Bezug waschbar bis 95°, tumlerfest	Bezug waschbar bis 95°, tumlerfest	Bezug waschbar bis 95°, tumlerfest
Garantie	Kern: 10 Jahre (ab 3. Jahr pro rata), Bezug: 2 Jahre	Kern: 10 Jahre (ab 3. Jahr pro rata), Bezug: 2 Jahre	Kern: 10 Jahre (ab 3. Jahr pro rata), Bezug: 2 Jahre
Swiss made 	EN ISO 9001/2000	EN ISO 9001/2000	EN ISO 9001/2000

MEMOBA-Gesundheitskissen

Hygiene

MEMOBA-Kissen werden mit einem Obatex Schutzbezug ausgerüstet. Dieser ist bei 95°C waschbar, tumblerfest, atmungsaktiv und inkontinenzbeständig. Der Kissenkern kann ebenfalls gewaschen werden!



Ergonomische Form

Dank den ergonomischen Formen aller MEMOBA-Kissen passen sich diese optimal dem Nacken an. So können Nackenschmerzen gelindert werden.

Angenehmes Klima

Auf Grund der offenporigen MEMOBA-Schaumstoffstruktur ist das Kissen luftdurchlässig und bietet somit ein angenehmes, trockenes Schlafklima.



MEMOBA-Nackenkissen Soft und Medium

Masse: 55 x 30 x 12 / 8 cm
 Füllung: MEMOBA-Soft oder Medium mit Zusatzplatte
 Bezug: Baumwolle gesteppt, waschbar
 Variante: Obatex beige oder schwarz



MEMOBA-Lagerungskissen Adagio

Masse: 65 x 45 x 8 cm
 40 x 30 x 8 cm
 Füllung: MEMOBA-Soft mit Flockeninhalte
 Bezug: Obatex beige oder schwarz



MEMOBA-Knierolle und Halbrolle

Masse: Durchmesser 20 cm x 50 cm
 Füllung: MEMOBA-Medium
 Bezug: Obatex beige oder schwarz



MEMOBA-Nackenkissen Saponetta

Masse: 50 x 30 x 10 / 5 cm
 Füllung: MEMOBA-Soft
 Bezug: Obatex beige oder schwarz



MEMOBA-Lordose-Rückenkissen

Masse: 36 x 38 x 7 cm
 Füllung: MEMOBA + HR-Schaum
 Bezug: Trikot Jersey schwarz mit Reissverschluss und 2 Tragriemen, waschbar



MEMOBA-Sitzkissen keilförmig

Masse: 40 x 40 x 6,5 cm
 mit Einschnitt für Sacrum
 Füllung: MEMOBA-Duro
 Bezug: Obatex beige oder schwarz



MEMOBA-Rollstuhlkissen


Anatomisch geformt
 Masse: 40 x 40 x 12 / 9 cm
 Füllung: MEMOBA-Medium
 Bezug: Obatex schwarz mit einem Antirutschbelag



MEMOBA-Sitzkissen

MEMOBA-Medium und Duro
 Masse: 40 x 40 x 4 cm
 40 x 40 x 6 cm
 Füllung: MEMOBA-Medium oder Duro
 Bezug: Obatex beige oder schwarz

Hervorragende Druckentlastung

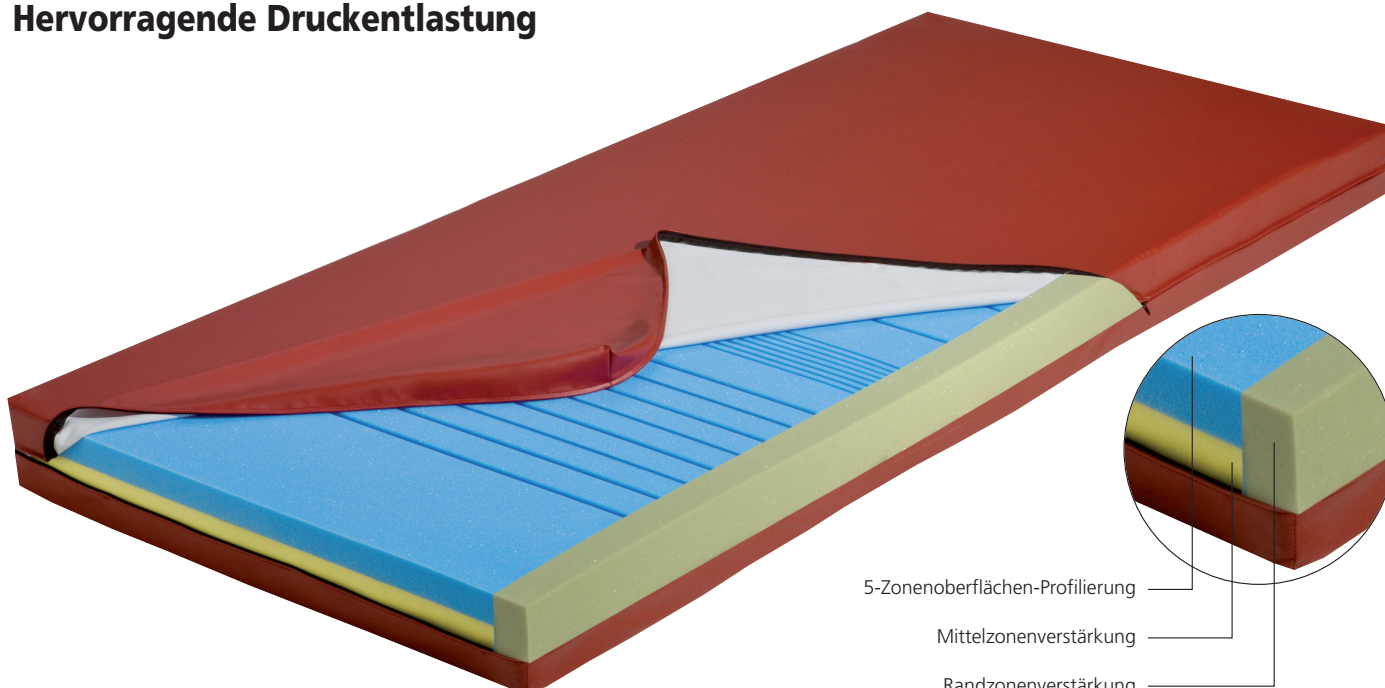

Beste Druckentlastung

Die 5-Zonenoberflächen-Profilierung passt sich optimal dem Körper an. In Verbindung mit der viscoelastischen Mittelzonenverstärkung wird das Entstehen von Druckstellen vermindert.


Gute Stabilität

Die angebrachten Randzonenverstärkungen sorgen für die nötige Stabilität und dienen gleichzeitig als Aufstehhilfe.


Hygiene

Der Inkontinenz-Schutzbezug OBATEX BRAVO schützt die Matratze vor Feuchtigkeit und ist einfach zu reinigen. Der Bezug ist Wasserdampf durchlässig und resistent gegen organische Flüssigkeiten.

Härtegrad	weich – mittel
Dekubitusgrad	2
Patientengewicht	bis 150 kg
Grösse	Standard: 90 x 200 cm, alle Grössen erhältlich
Höhe	15 cm
Matratzengewicht	14 kg
Raumgewicht	45 / 60 kg/m ³
Kern	Kombikern EvoPore-Mischporenschaum / SAF gelb
Längskantenverstärkung	50 kg/m ³
Handgriffe	auf Wunsch: 4, 8
Bezug	Obatex BRAVO, rost, flammhemmend
Pflege	Bezug waschbar bis 95 °C, tumblerfest
Garantie	Kern: 10 Jahre (ab 3. Jahr pro rata), Bezug: 2 Jahre
Swiss made	EN ISO 9001/2000

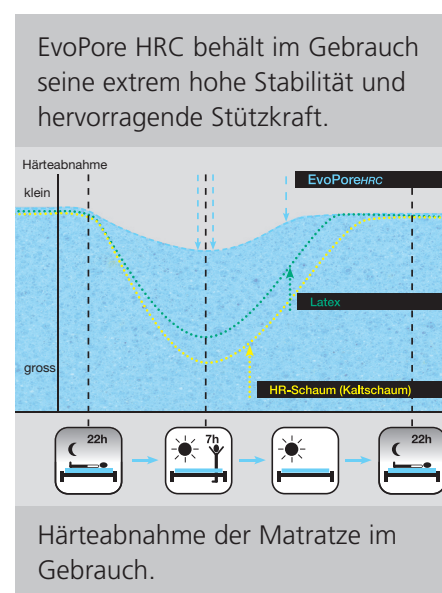

Die beliebte Matratze mit vielen Einsatzmöglichkeiten

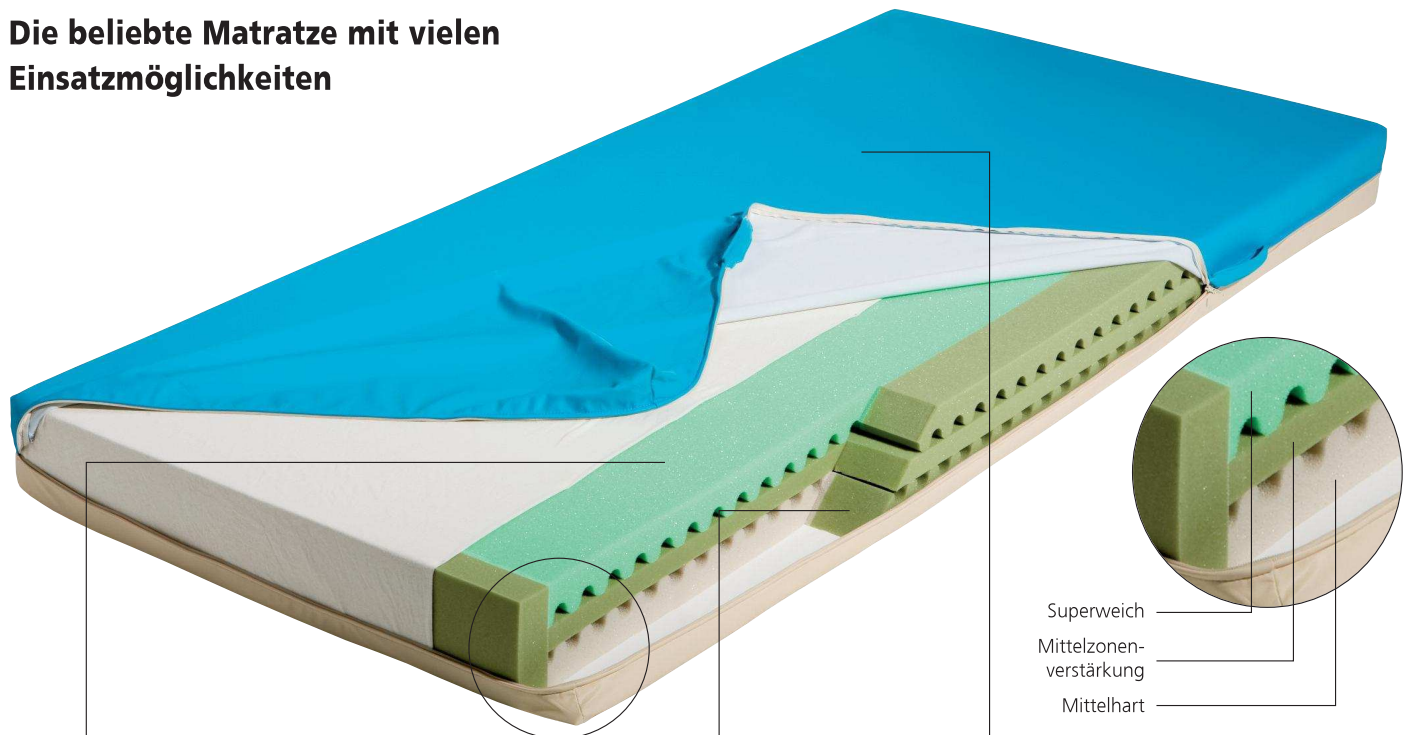

Druckentlastung

Die superweiche Seite der Matratze ermöglicht eine druckentlastende Lagerung und bietet eine effiziente Dekubitusprophylaxe. Die mittelharte Seite wird für einen normalen Liegekomfort eingesetzt.

Sicherheit

Die Randzonenverstärkung garantiert grosse Stabilität und dient als Aufstehhilfe. Dank dem zweifarbigen Schutzbezug kann die superweiche Seite von der mittelharten Liegefläche unterschieden werden.

Hygiene

Der Inkontinenz-Schutzbezug Obatex DA schützt die Matratze vor Feuchtigkeit und ist einfach zu reinigen. Der Bezug ist waschbar bei 95°C, tumblerfest, flammhemmend ausgerüstet sowie wasserdampfdurchlässig und resistent gegen organische Flüssigkeiten. Die Luftkanäle im Matratzenkern sowie die Auflage aus reiner Schafschurwolle sorgen für eine gute Luftzirkulation und einen gesunden Wärmeausgleich.

Härtegrad	weich und mittel
Dekubitusgrad	2
Patientengewicht	bis 120 kg
Grösse	Standard: 90 x 200 cm, alle Grössen erhältlich
Höhe	15 cm
Matratzengewicht	13 kg
Raumgewicht	45 / 40 kg/m ³
Kern	HRC-Schaum-EvoPore
Längskantenverstärkung	50 kg/m ³
Handgriffe	auf Wunsch: 4, 8
Bezug	Obatex DA beige und aquamarine, flammhemmend
Pflege	Bezug waschbar bis 95°, tumblerfest
Garantie	Kern: 10 Jahre (ab 3. Jahr pro rata), Bezug: 2 Jahre
Swiss made	EN ISO 9001/2000

Einsatzmöglichkeiten

- Alters- und Pflegeheime
- Spitäler
- Seniorenresidenzen

Empfehlung

Beachten Sie unser dazu passendes Lagerungskissen-Programm Polymoove.

Das APM 460 sensor Wechseldrucksystem wird für die Behandlung von Dekubitus bis einschliesslich Stadium IV nach EPUAP eingesetzt.

Die APM 460 verfügt zusätzlich über einen «Drucksensor» unterhalb der Zellen im Bereich des Rumpfes. Dieser reagiert auf das Patientengewicht und stellt den Druck automatisch ein. Ein zusätzlicher Neigungssensor erhöht den Druck bei Aufstellen des Kopfendes.



7 extra-schmale Zellen im Fersenbereich

- bi-elastischer, atmungsaktiver PU-Bezug, knickfreie Anschlussschläuche, Anschlusskupplung mit Transportsicherung, aussenliegendes CPR-Ventil
- sensorgesteuertes Druckmanagement, Abschaltung zwischen den Zyklen, automatische Tastatursperre, Wechseldruck-, Statik- und Caremodus
- Sensor-Pad für eine automatisch gesteuerte Druckanpassung
- Lagerung bis 230 kg Patientengewicht



Technische Daten

Artikel-Nr. 991900N

Steuergerät

Masse: ca. 39 x 21 x 12 mm
Gewicht: ca. 5 kg

2 Membrankompressoren, digitale Steuerung mit Drucksensor, Wechseldruck, Statikbetrieb, Care-Modus, 3 Zeitzyklen (5/10/15 Min.), automatische Tastatursperre, Unterdruckalarm, Netzausfallalarm, Backup-Funktion

Matratze

Masse aufgepumpt
inkl. Basismatratze: ca. 200 x 88 x 22 cm
Gewicht: ca. 12,5 kg
20 Zellen, 3 Kopfzellen statisch, knickfreie Anschlussschläuche, selbstschliessende Anschlusskupplungen, CPR-Notfallentlüftung

Materialien

Zellen: Nylon mit Polyurethanbeschichtung
Bezug: PU/PES, bi-elastisch, atmungsaktiv, rutschhemmend
Basis: Nylonbezug mit eingearbeiteter Tasche für 2 cm Basismatratze

Im Lieferumfang enthalten

Transporttasche für Matratze und Steuergerät
Schaumstoff-Matratzenbasis mit Nylonbezug

Dekubitusgrad:

I II III IV

Max. Patientengewicht: 230 kg

* inkl. Transportsicherung

ASX digital



Wechseldrucksystem zur Behandlung von Dekubitus bis Stadium IV nach EPUAP.

Die ASX digital verfügt über 18 Nylon/PU-Zellen. Drei Kopfzellen sind statisch. Der bi-elastische Bezug ist atmungsaktiv, PU-beschichtet und mit einem umlaufenden Reissverschluss versehen. Durch die Sandwich-Konstruktion wird zudem eine Basismatratze mit 3 cm Höhe integriert. Das System ist für Patienten mit einem Gewicht von 20 bis 200 kg geeignet.



Technische Daten

Artikel-Nr. 997108

Steuergerät

Masse: ca. 30 x 18 x 12 cm
Gewicht: ca. 2,7 kg

Membrankompressor, digitale Steuerung mit Drucksensor, Wechseldruck, Statikbetrieb, 10 Min. Zeitzyklus, Touch-Pad-Bedienfeld, Unterdruckalarm (visuell und akustisch)

Matratze

Masse aufgepumpt: ca. 200 x 90 x 18 cm
Gewicht inkl. Basismatratze: ca. 10,2 kg

18 Zellen (Ø ca. 15 cm), knickfreie Anschlussschläuche (inkl. Transportsicherung), CPR-Notfallentlüftung

Materialien

Zellen: Nylon mit Polyurethan-Beschichtung
Bezug: PU, bi-elastisch, atmungsaktiv, rutschhemmend, mit umlaufendem Reissverschluss

Im Lieferumfang enthalten

Transporttasche für Matratze und Steuergerät, Schaumstoff-Matratzenbasis mit Nylonbezug

Dekubitusgrad:

● I ● II ● III ● IV

Max. Patientengewicht: 200 kg

Weiterbildungsangebot mit Frank Mettler, Pflegefachmann HF am Universitätsspital Basel

Block 1: Dekubitus-Prophylaxe

Grundsätzliches

Einführung

- a) Demographische Entwicklung
 - 1. Überalterung und
 - 2. Multikulturelle Bewohner wie Pflegepers
- b) Prävalenzerhebung
- c) Kosten und rechtliche Seite
- d) Norton Skala
- e) Erfolgsrezept dank interdisziplinärer Zusammenarbeit

Praktische Umsetzungen

Lagerungen

- a) kleine Materialkunde
- b) 30 Grad Lagerung / Positionierungen
- c) Tipps und Tricks
- d) Patientenvisite (zusätzlicher Zeitaufwand)

■ **Dieser Bereich kann auch einzeln als Weiterbildung angeboten werden.**

Die 5 Therapieprinzipien

1. Druckentlastung

- a) Entstehung eines Dekubitalulzeras und Lokalisationen
- b) Gradeinteilungen
- c) 30 Grad Lagerung und weitere Druckentlastungen
- d) Div. Bettsysteme und ihre Einsatzmöglichkeiten
- e) Abgrenzung Kinästhetik. Basale Stim. Spez. Lagerungen

2. Nekrose entfernen

- a) Mechanisches Debridement
- b) Enzymatisches Debridement
- c) Wundzustand

3. Lokalinfection behandeln

- a) Lokalinfection (erfassen der Problematik durch Pflege)
- b) Osteomyelitis

4. Risikofaktoren eliminieren

- a) Ernährung
- b) Mobilisation
- c) Allgemeine
- d) Demenz / Psyche «Druck macht einsam»

5. Wundverbände

- a) Grundsätze der Wundbehandlung
- b) kleine Materialkunde
- c) Wunddokumentation
- d) Beispiele

6. Plastische Chirurgie

- a) Kleine Einführung und Beispiele

Block 2:

Individuelle Problemlösungsansätze

- a) Bewohner mit komplexen Herausforderungen
- b) Analyse Hilfsmittel
- c) Support Führung (Dekubitus und Lagerung)
- d) Support Organisation
- e) Ein Dekubitusteam oder Ressourcenpflege ausbilden

■ **Dieses Thema kann auch mit Block 1 und 3 kombiniert werden.**

Block 3: Kompressions-Therapie



Theorie

- a) Indikationen und Kontraindikationen
- b) Wirkung
- c) Arten der Kompressionstherapien

Praktische Ansätze

- a) Materialkunde
- b) Verbandstechnik
- c) Gegenseitiges Üben

■ **Die Kompressions-Therapie ist eine eigene Weiterbildung.**

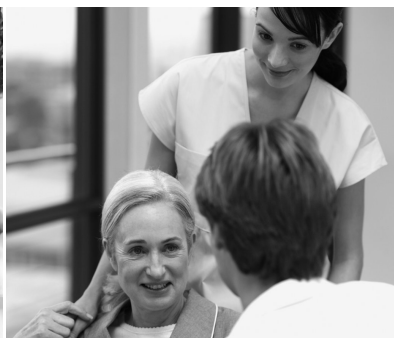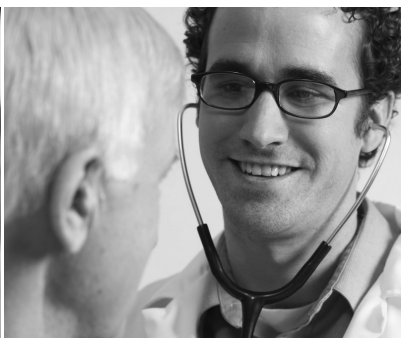

OBA AG
Auf dem Wolf 20
CH-4002 Basel

Matratzen- und
Polstermöbelfabrik
Bettwaren · Spitalbedarf

T +41 61 317 93 00
F +41 61 317 93 01
www.oba.ch · info@oba.ch