



XENON²
HERVORRAGENDE FAHR-
UND FALTPERFORMANCE

XENON² – DIE STILVOLLE, HIGH-PERFORMANCE SERIE

Egal, ob Sie nach der besten Fahrdynamik oder dem kompaktesten Faltrahmen Ausschau halten, der Xenon² vereint beide Elemente auf eindruckliche Art und Weise.

Begeistert Sie das klare, stromlinienförmige Design des Xenon² mit fixem Vorderrahmenteil? Ist es eher die praktische Portabilität des Xenon² mit wegnehmbaren Fußstützen? Oder der verstärkte Rahmen des Xenon² Hybrid? Egal für welches Modell Sie sich entscheiden, die Eleganz des Xenon² wird auch Sie vollends überzeugen.



„ Musik ist Ihre Passion. Ihre Texte sind ausdrucksvoll: Monika Kuszyńska hat für Polen mit Ihrem Song „In the Name of Love“ am Eurovision Song Contest in Wien teilgenommen. In Polen ist sie bereits äusserst erfolgreich und teilt Ihre Botschaften nun auch mit dem Rest der Welt.



XENON² DER LEICHTESTE

Der leichteste Faltrahmen-Rollstuhl weltweit.
Offener fixer Vorderrahmen.
Cooles und stromlinienförmiges Design.



XENON² HYBRID DER STÄRKSTE

Keine Kompromisse bei der Rahmen-Steifigkeit.
Verstärkter fixer Vorderrahmen.
Maximales Benutzergewicht: 140 kg.



XENON² SA DER ALLROUNDER

Der verstärkte Rahmen mit abnehm-/weg-
schwenkbaren Fussstützen eignet sich
bestens für stehende Transfers.
Dank kompaktem Faltmass lässt sich der
Rollstuhl einfach im Auto transportieren.





DER LEICHTESTE FALTRAHMEN-ROLL- STUHL DER WELT...

Wie erreicht man ein Faltrahmen-Rollstuhlgewicht unter 8.8 kg? Durch den Einsatz von Premium Rahmenmaterialien wie Flugzeugaluminium und einem innovativen Verfahren, das einzigartig ist bei den SOPUR Produkten – der ShapeLoc Technologie.

Durch eine spezielle Wärmebehandlung sind wir in der Lage, die Festigkeit des Materials zu erhöhen und das Aluminium in einer dünneren Wandstärke herzustellen. Damit ist der Xenon² leichter und stabiler als herkömmliche Faltrahmen-Rollstühle. Testen sie den neuen Xenon² – Sie werden begeistert sein...





...MIT EINZIGARTIGEM FALTMECHANISMUS

Das Herzstück des Xenon² ist seine einzigartige Kreuzstrebe, welche beinahe unsichtbar unter der Sitzbe-
spannung liegt. Die minimalistisch ausgelegte Kreuz-
strebe, kombiniert mit dem offenen Rahmen, erinnert
an das Design eines Starrahmen-Rollstuhls.

Aber die Ähnlichkeit endet nicht mit dem Aussehen – die komplett neu ge-
staltete Radachse (kombiniert mit der Kreuzstrebe) garantiert ein solides
und stabiles Fahrverhalten. Das Fahrgefühl erinnert an einen starren
Rahmen, aber mit der Handlichkeit eines Faltrahmen-Rollstuhls.

→ Einfacher Faltmechanismus

Die neuen Kreuzstreben-Laschen aus Aluminium
führen dazu, dass die Räder auch beim Falten parallel
verlaufen. Dadurch bleibt Ihr Xenon² stabil – in jeder
Situation...






STILVOLL IN BEWEGUNG

Personalisieren Sie Ihren Xenon² und verleihen Sie Ihrem Rollstuhl seine ganz individuelle Farbnote - mit einer der 32 Farben. Daneben sorgen 5 Farbpakete für das Eloxieren einiger Anbauteile für zusätzliche Ästhetik. Der Farbstreifen des neuen EXO Rückens rundet Ihren farblich ganz auf Sie abgestimmten Xenon² ab.

→ **Personalisieren Sie Ihren Xenon²**
mit einer der 32 Rahmenfarben

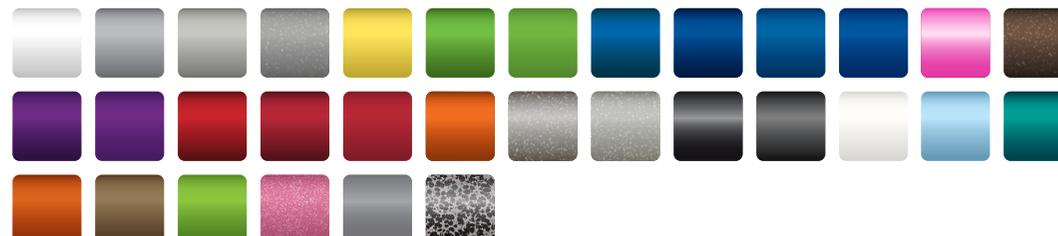

” **Monika Kuszyńska:** Ich mag modische Outfits.
Das attraktive Design des Xenon² ergänzt
meinen kreativen Stil in perfekter Art und Weise.



→ **Bringen Sie Farbe in
Ihre Rückenbespannung**

Für unsere äusserst
komfortable EXO
Rückenbespannung
stehen 5 verschieden-
farbige Einfassbänder
zur Auswahl.



→ **Ihre ganz persönliche Farbnote - auch bei Lenkradgabel & Felge**

Sowohl Lenkradgabel als auch Felge sind in 5 verschiedenen eloxierten Farben erhältlich:
Silber matt, Blau, Rot, Orange oder Schwarz - für einen einzigartigen Look!

” **Monika Kuszyńska:** Mein Xenon² ist wie meine Musik – ein Teil von mir. Wenn ich um die Welt reise, begleitet er mich überall hin.



AUF IHRE BEDÜRFNISSE ANPASSBAR

Entworfen, um den wechselnden Bedürfnissen gerecht zu werden. Die neue und verbesserte Achsaufnahme des Xenon² ermöglicht eine einfache Höhenverstellung durch Entriegeln und Neupositionieren der Achsklemmen.

Möchten Sie die Schwerpunkteinstellungen Ihres Rollstuhls von passiv auf eher aktiv umstellen? Durch einfaches Entriegeln und Neupositionieren der Achsklemmen kein Problem. Und vergessen Sie nicht den Rückenwinkel entsprechend anzupassen, damit eine ergonomische Sitzhaltung gewährleistet bleibt.

1 Schwerpunkt

Ermöglicht Einstellungen von sehr aktiv bis passiv.

2 Rückenwinkel

Eine gute ergonomische Sitzhaltung kann dank der entsprechenden Einstellung des Rückenwinkels sichergestellt werden.

3 Hintere Sitzhöhe

Passen Sie die hintere Sitzhöhe entsprechend Ihren individuellen Bedürfnissen an.





XENON²
DER LEICHTESTE



XENON² HYBRID
DER STÄRKSTE



XENON² SA
DER ALLROUNDER

XENON²

Ultraleicht – mit hervorragender Fahrperformance und einzigartigem Faltmechanismus



Stellen Sie sich den Xenon² nach Ihren individuellen Bedürfnissen zusammen. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Optionen. Zusätzliche Informationen zu den hier aufgeführten Optionen entnehmen Sie bitte den Bestellformularen Xenon² & Xenon² SA.



// RÜCKEN ABKLAPPBAR

Der abklappbare Rücken ermöglicht ein kompaktes Faltmass - ein grosser Vorteil beim Transport des Rollstuhls.



// SURGE® LT GREIFREIFEN

Maximale Traction dank bestem Grip!



// RÜCKEN WINKELVERSTELLBAR

Stilvoller Designer-Rücken, optimal in die Rahmenform integriert. Rückenwinkel von -15° bis +13° in 4° Schritten.



// DESK SEITENTEIL

Die rückklapp- und abnehmbaren Desk-Seitenteile können mit fixen oder höhenverstellbaren Armauflagen bestellt werden.



// BÜGELARMAUFLAGE GEPOLSTERT

Die Bügelarmauflage erlaubt einen guten Support, wenn benötigt. Für einen hindernisfreien Antrieb des Rollstuhls kann sie problemlos abgeschwenkt werden.



// CARBON SEITENTEIL

Leichtgewichtiges Seitenteil mit einzigartigem Look.



// FUSSRASTE AUTOMATISCH MITFALTEND

Die automatisch mitfaltende Fussraste ist sowohl winkel- als auch tiefeinstellbar und mit Karbon- oder Kunststoff-Fussauflagen bestellbar. Nur für die Versionen mit fixem Vorderrahmenteil erhältlich.



// FIXATION FÜR BEHINDERENTRANSPORT

Mit dieser Fixation ist der Rollstuhl für den Transport im Fahrzeug zugelassen (Crash Test gem. ISO 7176-19).

TECHNISCHE DATEN

	Xenon ²	Xenon ² Hybrid	Xenon ² SA
Max. Benutzergewicht:	110 kg	140 kg	125 kg
Sitzbreite:	32 – 46 cm	32 – 50 cm	32 – 50 cm
Sitztiefe:	34 - 50 cm	34 - 50 cm	34 - 50 cm
Sitzhöhe vorne:	43 – 55 cm	43 – 55 cm	43 – 56 cm
Sitzhöhe hinten:	37 – 50 cm	37 – 50 cm	37 – 50 cm
Rückenhöhe:	25 – 47.5 cm	25 – 47.5 cm	25 – 47.5 cm
Rückenwinkel:	-15° bis +13° in 4° Schritten	-15° bis +13° in 4° Schritten	-15° bis +13° in 4° Schritten
Schwerpunkteinstellungen:	4 – 13 cm	4 – 13 cm	4 – 13 cm
Radsturz:	0° / 2° / 4°	0° / 2° / 4°	0° / 2° / 4°
Rahmenversion:	Offener Rahmen mit fixem Vorderrahmen	Verstärkter Rahmen mit fixem Vorderrahmen	Verstärkter Rahmen mit abschwenkbaren FS
Gesamtgewicht:	ab 8.8 kg	ab 9.5 kg	ab 10.3 kg
Rahmenfarben:	32	32	32
Crash Test:	Ja	Ja	Ja

Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Bestellformulare oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Technische Änderungen, Anpassungen und Druckfehler vorbehalten.



Sunrise Medical AG
 Lückhalde 14
 3074 Muri/Bern
 Fon: 031 958 3838
 Fax: 031 958 3848
 info@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch

