



Einfach mobil.

e-fix<sup>®</sup>

Elektrischer Zusatzantrieb



VON KRANKENKASSEN  
ANERKANNT

Klein. Leicht. Wendig.

[www.alber.de](http://www.alber.de)



*„Wie schön, wieder  
gemeinsam unterwegs  
zu sein.“*

# Mobilität einfach erfahren.

## Neue Unabhängigkeit genießen.

Mit dem e-fix, dem elektrischen Zusatzantrieb für Ihren Rollstuhl, erweitern Sie einfach Ihren Bewegungsfreiraum. Ganz ohne Anstrengung bewältigen Sie so auch längere Strecken oder Steigungen.


Die Umrüstung ist völlig unkompliziert: Durch Ihren Fachhändler werden lediglich die Antriebsräder ausgetauscht sowie Akku-Pack und Bediengerät montiert – fertig. Die Motoren sind dezent in den Radnaben versteckt. Alle gängigen Rollstuhlmodelle lassen sich auf diese Weise mit dem e-fix ausrüsten. Das heißt: Sie können weiterhin Ihren optimal angepassten und gewohnten Rollstuhl verwenden.

Der e-fix bringt Sie mühelos an Ihr Ziel: Egal ob im Haus, beim Einkaufen oder auf Tour mit dem Pkw.

## Flexibel bleiben – zwei Rollstühle in einem!

Wenn es die Situation erfordert, lässt sich der e-fix auch spielend leicht manuell bewegen: Sie kuppeln die Antriebsräder mit einem Handgriff aus und Ihr Rollstuhl lässt sich wie gewohnt von Hand anschieben – entweder über die Greifreifen oder durch eine Begleitperson.

## Die e-fix Komponenten:

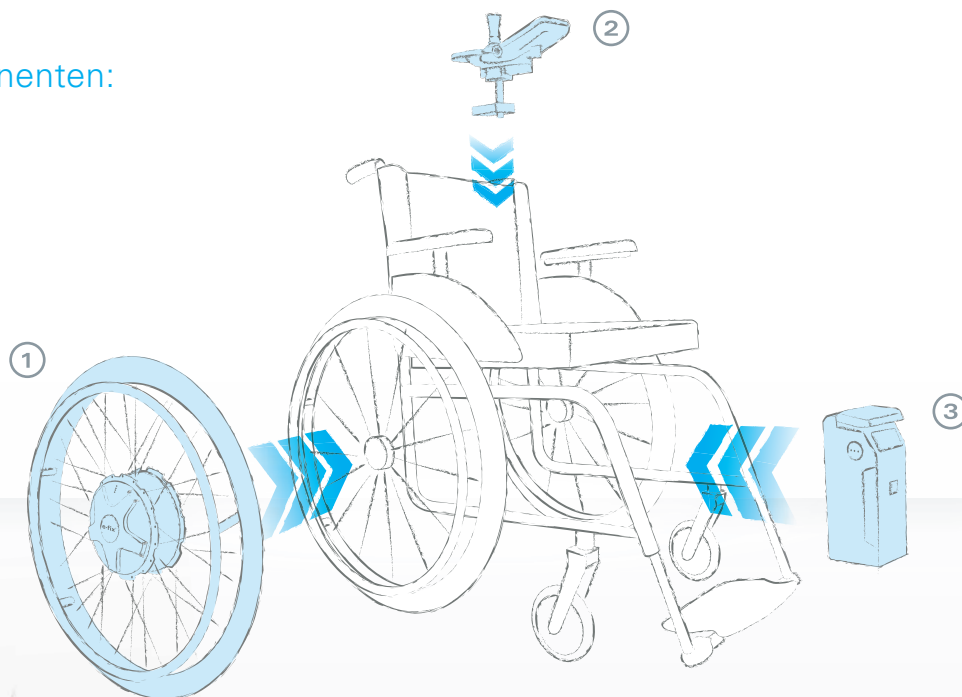

### 1 KRAFTVOLL – die Antriebsräder

Per Schnellverschluss bequem am Rollstuhl anzubringen und abzunehmen, platzsparend für den Transport.



### 2 ERGONOMISCH – das Bediengerät

Ergonomisch angeordnete Bedienelemente, große und informative Displayanzeige, individuell einstellbare Fahreigenschaften.



### 3 KLEIN UND LEICHT – der Akku-Pack

Platzsparend unter dem Sitz eingehängt, reicht für eine Fahrstrecke bis zu 16 km\*.

\* abhängig von Personengewicht, Rollstuhleinstellungen und Untergrund. Mit optionalem, kapazitätserweitertem Akku-Pack Reichweite bis 22 km.

*„Mit dem e-fix ist mein  
Alltag viel leichter.“*



# Mehr Mobilität. Aber wie?

## Einfach bedienfreundlich.

Ihr Rollstuhl lässt sich mit dem e-fix kinderleicht steuern – Sie werden auf Antrieb zurechtkommen! Die Geschwindigkeit stellen Sie am griffgünstigen Regler stufenlos von 0,6 bis 6 km/h ein. Dabei gilt: Je langsamer Sie fahren, desto weniger verhält sich Ihr Rollstuhl. Sie lenken, der e-fix denkt!

Auch sonst bietet Ihnen das kleine Bediengerät großen Fahrkomfort. Sein klares, beleuchtetes Farbdisplay liefert alle wichtigen Informationen, wie Akku-Ladung und Geschwindigkeit, auf einen Blick. Und wenn Sie möchten, passen Sie Ihren e-fix mit der intuitiven Menüführung mühelos Ihren persönlichen Wünschen an. Zudem sind intelligente Zusatzfunktionen enthalten, wie die integrierte Umfeldbeleuchtung\*, die bei Dunkelheit den Fahrweg ausleuchtet.

## Mehr Freiheit im Alltag.

Die zwei leisen, aber leistungsstarken Antriebe machen den e-fix sowohl im Außen- als auch im Innenbereich zum idealen Begleiter. Einerseits auf der Stelle drehen und auf engstem Raum rangieren, andererseits aber kraftvoll und sicher Steigungen\*\* bewältigen – kein Problem für den e-fix.

\* nicht gemäß StVZO

\*\* bis zu 20 % Steigung und Gefälle möglich, abhängig von der e-fix Version und dem Rollstuhlmodell

## Leicht und handlich.

Der Akku-Pack Ihres e-fix ist mit nur 2 kg Gewicht extrem leicht und mit nur 8 cm Breite sehr schmal. Dank der intelligenten Akku-Aufnahme genügt eine Hand zum Entnehmen bzw. Einsetzen. Die meisten Faltrollstühle lassen sich sogar mit eingebautem Akku zusammenfalten.



Aussagekräftiges Farbdisplay und benutzerfreundliche Bedienelemente



Kompakt, leise, kraftvoll: der e-fix Antrieb

# Maßarbeit wie Ihr Rollstuhl.

## Konfigurieren Sie Ihren e-fix individuell.

Der e-fix passt sich Ihren Bedürfnissen an – ob sanft oder sportlich: Der Antrieb lässt sich individuell programmieren. Somit werden die Fahreigenschaften maßgeschneidert auf Sie angepasst. Das Bediengerät kann für Links- oder Rechtshänder passend montiert werden.

Mit den optional erhältlichen Antriebsrädern mit höherer Leistung kann der e-fix bis zu einem Personengewicht von 160 kg genutzt werden. Und wenn Sie mal nicht selbst fahren möchten, dann einfach die intuitive Begleitsteuerung einstecken und der e-fix wird zur Schiebe- und Bremshilfe für Ihre Begleitperson. Ein umfangreiches Zubehörprogramm bringt zusätzlich Erleichterung und Komfort ins Leben.

## Ausgezeichnete Produkte erkennt man an ihren cleveren Details.

Der kleine Lithium-Ionen Akku-Pack ist mit nur 2 kg besonders leicht und somit sehr praktisch in der Handhabung. Die lange Lebensdauer und die 24-monatige Herstellergarantie sorgen rundum sicher für mobile Energie.

Durch das Magnet-Stecker-System EasyConnex findet der Stecker des Bediengeräts und des Ladegeräts sicher in seine Position. Auch die Auto-Kontaktierung des Akkus in der innovativen Akku-Aufnahme ist äußerst hilfreich im Alltag.



e-fix E36: kraftvolle Antriebsräder mit mehr Leistung (optional)



## Vielfältiges Zubehör.



**1. Intuitive Begleitsteuerung:** Auf Knopfdruck wird aus dem e-fix eine Schiebe- und Bremshilfe für die Begleitperson.



**2. Schwenkarm:** Erleichtert das direkte Heranfahren an Tische.



**3. Aufbock-Kippstützen:** Kippschutz, der auch das Abnehmen der e-fix Räder erleichtert.

**4. und vieles mehr...** Alber oder Ihr örtlicher Sanitätsfachhändler beraten Sie gerne ausführlich zum umfangreichen Zubehörprogramm.



„Klasse!  
Der e-fix ist ruckzuck  
zerlegt und verladen.“

## Handliche Technik für unterwegs.



### So klein. So gut.

Geringes Gewicht, kein Werkzeug nötig. Zum Verladen nur die Schnellverschlüsse lösen und die e-fix Komponenten vom Rollstuhl abnehmen. Kein Teil wiegt mehr als 7,8 kg, alles findet in jedem Kofferraum bequem Platz. Am Ziel ist der e-fix Rollstuhl dann ebenso schnell wieder fahrbereit.

### Service.



Keine Sorge: Der einzigartige 48-Stunden Mobilitätsservice von Alber sorgt dafür, dass Sie bei einem Funktionsausfall innerhalb kürzester Zeit wieder mobil sind.

MADE IN GERMANY

Made in Germany vom Marktführer für Zusatzantriebe.

### Auf den e-fix ist Verlass.

Der e-fix ist ein Produkt von Alber, dem Spezialisten für besonders portable und bedienerfreundliche Mobilitätshilfen. Unabhängige Institutionen haben den e-fix auf Langlebigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit getestet und positiv bewertet.

An erster Stelle stehen für uns Sicherheitsprüfungen – zum Beispiel durch den TÜV: Sie erhalten bei Alber stets geprüfte Produktsicherheit nach den aktuellsten Richtlinien für Medizinprodukte.



# e-fix auf einen Blick.

## „Passt der e-fix an meinen Rollstuhl?“

Der e-fix passt an die meisten Rollstuhlmodelle. Es werden am Rollstuhlrahmen Halterungen zur Aufnahme der Antriebsräder montiert. Ihre manuellen Rollstuhlräder können Sie in der Regel weiterverwenden.

## „Wie schnell fährt der e-fix?“

Die maximale Geschwindigkeit des e-fix können Sie stufenlos zwischen 0,6 und 6 km/h wählen. So finden Sie mit Sicherheit Ihr optimales Fahrtempo. Das Fahrverhalten kann von Ihrem Fachhändler im Detail an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

## „Welche e-fix Varianten gibt es?“

Der e-fix ist für ein max. Personengewicht von 120 kg ausgelegt. Die verstärkten und leistungsstärkeren Antriebsräder (optional erhältlich) erlauben sogar ein Personengewicht von bis zu 160 kg. Den e-fix gibt es in den Radgrößen 22“ oder 24“.

## „Hilft der e-fix auch meiner Begleitperson?“

Ja! Mit der als Zubehör erhältlichen Halterung lässt sich das Bediengerät an den Schiebegriffen des Rollstuhls montieren. Die optionale intuitive Begleitsteuerung erleichtert der Begleitpersonen das Schieben.

## „Wie weit komme ich mit einer Akkuladung?“

Abhängig von Personengewicht, Geländeform, Temperatur, Rollstuhleinstellungen und Untergrund reicht eine Akkuladung für bis zu 16 km. Mit dem optional erhältlichen großen Akku-Pack erhöhen Sie die Reichweite auf bis zu 22 km. Alternativ ist auch ein zusätzlicher Wechselakku eine optimale Lösung, um die Reichweite zu erweitern.

## „Wie steil darf eine Rampe oder Steigung sein?“

Der e-fix schafft – abhängig von Rollstuhleinstellungen, Personengewicht und Untergrund – Steigungen bzw. Gefälle bis zu 20 %. \*\*

## „Kann der e-fix auch im Auto mitgenommen werden?“

Ja! Der modulare Aufbau macht's möglich. Alle e-fix Komponenten können einfach und ohne Werkzeug vom Rollstuhl abgenommen und platzsparend in jeden Pkw-Kofferraum verladen werden. Ihr Rollstuhl bleibt weiterhin faltbar.

## „Wie viel wiegt der e-fix?“

Antriebsräder	je 7,8 kg
Akku-Pack	2,0 kg
Bediengerät	0,6 kg
Schnittstelle	0,7 kg
Gesamtgewicht	18,9 kg

Der e-fix ist ein von den Kostenträgern anerkanntes Hilfsmittel. Die Hilfsmittelnnummer ist beantragt. Bei Fragen zur Erstattung hilft Ihnen Ihr Sanitätsfachhändler gerne weiter.

Der e-fix entspricht der Richtlinie 93/42/EWG und Änderungsrichtlinie 2007/47/EG für Medizinprodukte.

Unser Qualitätsanspruch: Ihre Sicherheit! Unser Unternehmen ist zertifiziert nach den aktuellsten Qualitätsmanagement-Standards (inklusive der jeweils neuesten Änderungen) ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003 für Medizinprodukte. Die umweltgerechte Herstellung unserer Produkte stellen wir mit unserem Umweltmanagementsystem, zertifiziert nach ISO 14001:2004, sicher.

Gewichtsangaben	e-fix E35	e-fix E36
Max. Personengewicht:	120 kg*	160 kg*
Max. Gesamtgewicht: (e-fix, Rollstuhl, Rollstuhlfahrer)	170 kg*	210 kg*

\* In Abhängigkeit vom verwendeten Rollstuhl und von der Eignung der Bedienperson sind Einschränkungen möglich.

\*\* bis zu 20 % Steigung und Gefälle möglich, abhängig von der e-fix Version und dem Rollstuhlmodell



41.0005.6.01.02 Stand 11/2014 © Alber GmbH, Albstadt  
Technische Änderungen vorbehalten.



**Alber GmbH**  
Vor dem Weißen Stein 21  
72461 Albstadt  
Telefon 07432 2006-0  
Telefax 07432 2006-299  
info@alber.de

[www.alber.de](http://www.alber.de)