



ATTITUDE
FREIHEIT PUR



DIE KOMPLETTE BIKE FAMILIE

ERLEBEN SIE IHRE FREIHEIT WIE NIE ZUVOR,
MIT DEN NEUEN ANDOCKBIKES DER
ATTITUDE SERIE!

Unabhängig davon, ob Sie trainieren oder Ihre Mobilität verbessern möchten, wir haben das perfekte Bike für Sie. Die manuelle Version ist eine unkompliziert einsetzbare Einheit zum Trainieren Ihrer Kraft und Ausdauer. Wenn Sie eine unterstützende Lösung suchen, wählen Sie die Hybrid Variante. Und das Power Bike zieht Sie leicht und locker zum gewünschten Ziel.



ATTITUDE Manual

DAS SPORTLICHE





ATTITUDE Hybrid

DAS ALLROUNDER-BIKE



ATTITUDE Power

DAS LEISTUNGSSTARKE




FAHRBEREIT IN WENIGEN SEKUNDEN

Mit dem cleveren Andockmechanismus der Attitude Bikes wird das Andocken an den Rollstuhl eine Angelegenheit von wenigen Sekunden. Ebenso schnell und einfach lässt es sich abkuppeln!

Der Andockmechanismus der Attitude Bikes ist sehr einfach, es ist nur ein Verriegeln an den Vorderrahmenteil Ihres Rollstuhls nötig. Es gibt keine störenden Teile und genügend Raum, um Ihre Beine richtig zu positionieren. So stört nichts den Komfort, den Sie sich von Ihrem Rollstuhl im Alltag gewöhnt sind.

Nur 2 unauffällig kleine Anbauteile werden an den Rollstuhl verbaut (Totalgewicht 170 gr!).


- 1 **Einklicken in die Andock-Pins**
- 2 **Das Bike leicht nach vorne drücken und den oberen Andockmechanismus nach unten schwenken**
- 3 **Durch Ziehen des roten Hebels die Verbindung verriegeln**

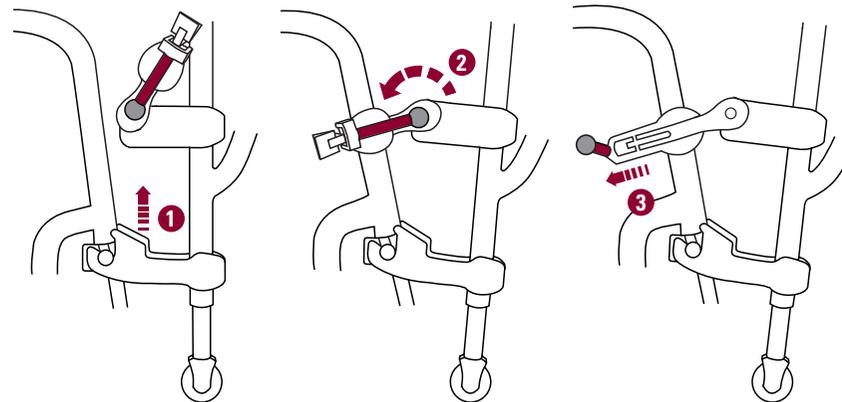



OPTIMALE POSITIONSEINSTELLUNG


Die neue Winkel- und Tiefeneinstellung der Kurbel sorgt bei den Attitude Manual und Hybrid Bikes für eine ergonomische Kurbelposition. Das ermöglicht Ihnen ein energieeffizientes Fahrvergnügen, auch über längere Distanzen.

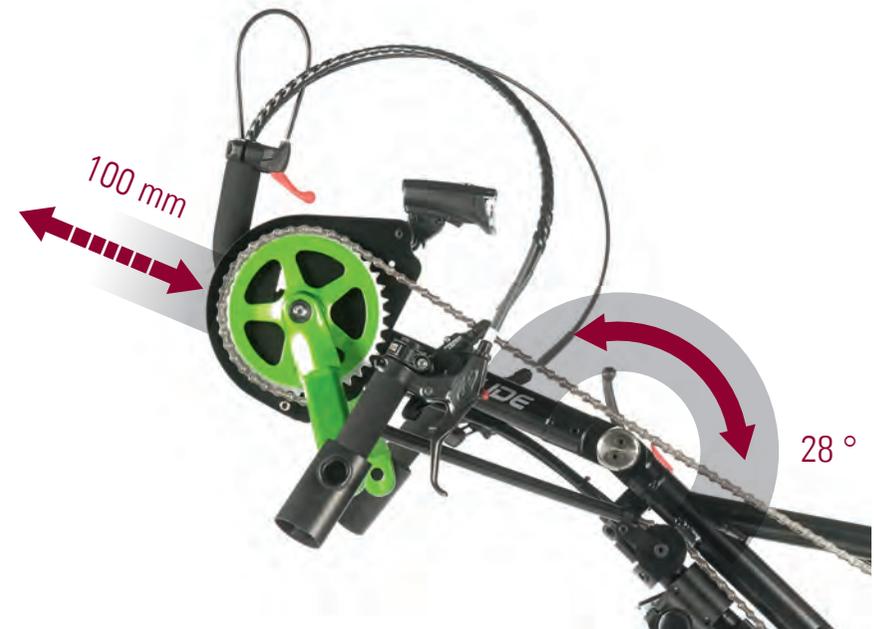

MANUEL – DAS SPORTLICHE

Das Attitude Manual ist ideal für jene, die Ihre Ausdauer und Kraft mit sportlichem Fahren verbessern möchten; oder ein manuelles Andockbike für Ihre Freizeitausflüge suchen. Das 20" Antriebsrad und ein 30 Gang Schaltwerk bieten ideale Fahrleistungen und sind für unterschiedliche Geländeformen geeignet. Das Bike ist leicht manövrierbar und die perfekte Ergänzung zu Ihrem Aktivrollstuhl.

Winkel- und Tiefeneinstellung
der Kurbelposition

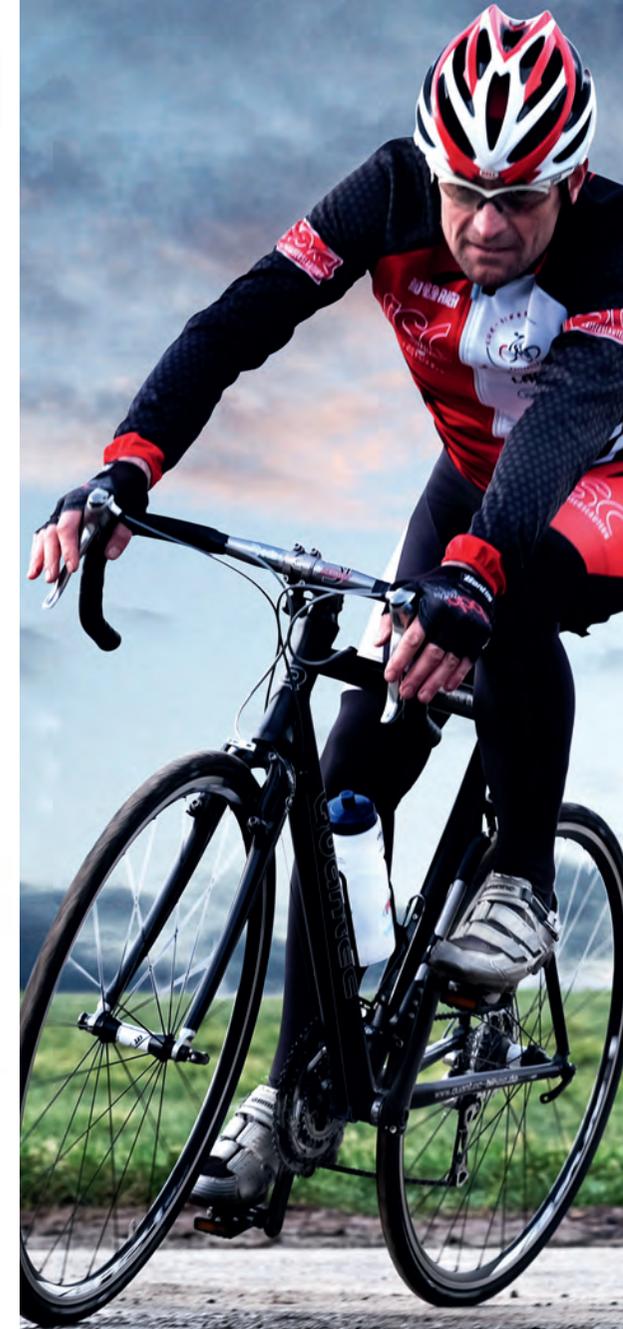

ATTITUDE

Manual



MANUAL | HYBRID | POWER



// DUAL DRIVE (3X10) SCHALTUNG

Die 30 Gang Schaltung ist ideal für jedes Gelände. Die Scheibenbremse erlaubt eine sichere Geschwindigkeitskontrolle.



// GRIP SHIFT SCHALTUNG

Die Drehgriffschaltung ermöglicht schnelle und einfache Schaltvorgänge.



// FARBEN

Kurbel- und Kettenschutzblechfarbe sind individuell wählbar.



// PARKBREMSE

Einfach zu bedienende Zusatz- und Parkbremse mit Einrastfunktion.

HYBRID – DER ALLROUNDER

Das Attitude Hybrid kombiniert die Vorteile eines manuellen Bikes mit der Zuverlässigkeit einer Unterstützung. Auch hügelige Ziele oder weitere Ausflüge lassen sich mit der zuschaltbaren Unterstützung problemlos meistern. Schalten Sie einfach die gewünschte Unterstützungsstufe zu und verteilen Sie Ihre Kräfte über die ganze Strecke.

Winkel- und Tiefeneinstellung der Kurbelposition



ATTITUDE

Hybrid

MANUAL | **HYBRID** | POWER



// LITHIUM-ION BATTERIE

17,5 Ah Lithium-Ion Akkus für eine ausreichende Unterstützung. Das Display zeigt den Batterie-Füllstand und die verbleibende Akku-Leistung an.



// STARKER 250 WATT MOTOR

Der kraftvolle 250 Watt Motor unterstützt bis 23 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit und ist auch bestens für hügliges Gelände und längere Distanzen geeignet.



// KONTROLL-DISPLAY

Mit dem MMI von Neodrives behalten Sie immer die Kontrolle über alle wichtigen Faktoren: Geschwindigkeitsanzeige, zurückgelegte Distanz oder Batterielaufzeit.



// ERGONOMISCHE V-KURBEL

Die ergonomisch ausgerichteten Griffe verhindern den Kontakt zum Körper. Besonders in engen Kurven und Wendungen ist das Manövrieren problemlos.

POWER – DAS KRAFTVOLLE

Die Attitude Power Ausführung unterstützt Sie zu 100%!
Geniessen Sie die Fahrt mit diesem elektronischen Zugerät
und lassen Sie sich geräuschlos über Hügel, Steigungen
und längere Fahrstrecken gleiten. So sind Sie
entspannt und frei und erreichen ohne
Anstrengungen das angepeilte Ziel.



ATTITUDE

Power

MANUAL | HYBRID | **POWER**



// STARKER 250 WATT MOTOR

Kraftvoller 250 Watt Motor bis 23 km/h Top Speed.



// EINSTELLBARER LENKER

Der ergonomische Lenker ist einstellbar und das Display zeigt einige Antriebsoptionen, die Akku-Reichweite und den Füllstand der Batterien an.



// LITHIUM-ION BATTERIE

9 Ah oder 13.4 Ah Lithium-Ion Akkus für eine grosse Reichweite. Lithium-Ion Akkus haben keinen Memory Effekt.



// INTEGRIERTES FRONTLICHT

Das helle Frontlicht wird direkt vom Akku mit Strom versorgt.

TECHNISCHE DATEN

<i>ATTITUDE</i>	<i>Manual</i>	<i>Hybrid</i>	<i>Power</i>
Max. Benutzergewicht	100 kg	100 kg	100 kg
Rollstuhlrahmenbreite (anpassbar +2 cm)	260 – 460 mm	260 – 460 mm	260 – 460 mm
Gewicht Andockteile am Rollstuhl	170 g	170 g	170 g
Bike Total Gewicht	14,5 kg	21,5 kg	15,3 kg
Antriebsrad, Grösse	20"	20"	16"
Max. Geschwindigkeit	–	23 kph	6 kph, 10 kph, 15 kph, 23 kph
Motor	–	250 W	250 W
Batterie	–	17,5 Ah	9 Ah & 13,4 Ah
Schalthebel	Trigger / Grip shift	Trigger / Grip shift	–
Schaltung	8 (Nabe) und 30 (Nabe und Kassette)	10 (Kassette)	–
V-Kurbel Breite	470 mm	470 mm	–
Grifflänge	170 mm	170 mm	–
Lenkerbreite	–	–	570 mm
Bremse	Scheibenbremse (180 mm)	Scheibenbremse (180 mm)	Scheibenbremse (180 mm)
Park- und Zusatzbremse	ja	ja	ja
Rahmenfarben	31	31	31



Sunrise Medical AG

Lückhalde 14
 3074 Muri/Bern
 Fon 031 958 3838
 Fax 031 958 3848
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch



Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Bestellformulare oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst. Technische Änderungen, Anpassungen und Druckfehler vorbehalten.